

INSTRUCCIONES DEL KIT DE RECOGIDA DE MUESTRAS NASALES

Lea atentamente todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones puede conducir a resultados incorrectos. Para obtener detalles completos y consejos para obtener los mejores resultados al recolectar su muestra, mire nuestro video en testandgo.com/testandgo-tests
Preguntas: Contáctenos en testandgo.com o llame (800) 402-0000.

¡DETENER! ANTES DE DEVOLVER EL KIT, CONFIRMAR:

- ✓ Use su dispositivo móvil para escanear el código QR en la etiqueta adhesiva del tubo en la caja. Complete las preguntas en su dispositivo para activar el kit. Debe completar este paso para recibir un resultado.
- ✓ Escriba la fecha de nacimiento y las iniciales en la etiqueta adhesiva del tubo y coloque la etiqueta en el tubo a lo largo.
- ✓ Limpie ambas fosas nasales y coloque el hisopo dentro del tubo. Selle el tubo y colóquelo en la bolsa de muestra.
- ✓ Devuelva la muestra el mismo día en que se recolectó.

CONTENIDO DEL EQUIPO



PAQUETE DE JUEGOS



TORUNDA



TUBO



BOLSA DE MUESTRAS CON ALMOHADILLA ABSORBENTE



ETIQUETA CON CÓDIGO QR



TOALLITAS DESINFECTANTES



BOLÍGRAFO

INSTRUCCIONES DEL EQUIPO

Activar equipo

- Escanee el código QR en la etiqueta del tubo en el kit.
- Si no puede escanear la etiqueta, llame a nuestra línea de ayuda para completar este paso: 800-402-0000.



Llenar etiqueta

El laboratorio solo puede procesar la muestra si la información correcta está escrita en la etiqueta.

- Escriba las iniciales y la fecha de nacimiento de la persona que se está analizando en la etiqueta del tubo.



Coloque la etiqueta en el tubo

Coloque la etiqueta en el tubo como se muestra.



Sonarse la nariz y limpiarse las manos


Una nariz despejada y manos limpias son importantes para obtener un buen espécimen

- Con un pañuelo limpio, suéñese suavemente la nariz y elimine cualquier residuo para despejar ambas fosas nasales. Si está cerca de otras personas, suéñese la nariz en un área privada.
- Cualquier persona que toque los suministros debe lavarse las manos. Use desinfectante/toallita o lávese las manos con jabón y agua tibia durante 20 segundos y séquelas bien con una toalla limpia.



Paquete de hisopos nasales abiertos

Retire el hisopo nasal del envoltorio separando los dos extremos del envoltorio (como si abriera una curita). Tenga cuidado de tocar solo el mango del hisopo, no la punta.

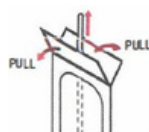

6 Limpie ambas fosas nasales


Nota: Los niños menores de 16 años deben ser hisopados por un adulto.

- Inserte suavemente toda la punta suave del hisopo en una fosa nasal hasta que sienta un poco de resistencia.
- Inserte menos de 1 pulgada en la fosa nasal para adultos y menos de 1/2 pulgada para niños más pequeños.
- Usando presión media, frote el hisopo lentamente con un movimiento circular alrededor de la pared interior de la fosa nasal cinco veces.
- La punta del hisopo debe tocar la pared interior de la fosa nasal en cada rotación.
- Repita el mismo proceso con el mismo hisopo en la otra fosa nasal.



7 Ponga el hisopo en el tubo

- Mientras sostiene el hisopo, abra el tubo.
- Coloque la punta del hisopo primero en el tubo.
- Vuelva a enroscar la tapa en el tubo firmemente.
- Deje la almohadilla blanca en la bolsa.
- Coloque el tubo en la bolsa de muestras y cierre bien la bolsa.

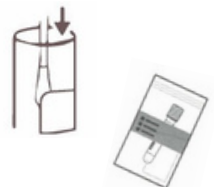

8 Manos limpias


Antes de devolver la muestra recolectada al quiosco, use desinfectante para manos/toallita desinfectante para limpiarse las manos.



9 Devolver espécimen

La muestra **DEBE** ser entregada el mismo día en que se recolecta.

- Deposite la bolsa de muestra con hisopo sellado en el tubo en la ranura indicado en el quiosco.

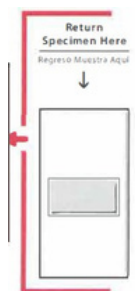

CUANDO TUS RESULTADOS ESTÉN LISTOS, RECIBIRÁS UN TEXTO O CORREO ELECTRÓNICO. SI NO RECIBE SUS RESULTADOS DENTRO DE LAS 48 HORAS DESDE QUE EL LABORATORIO RECIBIÓ SU MUESTRA, LLAME AL 800-402-0000 PARA OBTENER ASISTENCIA.

POR FAVOR LEE:

Busque atención médica inmediata de un profesional de la salud si está gravemente enfermo; NO espere los resultados de esta prueba. Llame al 9-1-1 si tiene una emergencia médica.