

## INSTRUCCIONES DEL KIT DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE SANGRE

Lea atentamente todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones puede conducir a resultados incorrectos. Para obtener detalles completos y consejos para obtener los mejores resultados al recolectar su muestra, mire nuestro video en [testandgo.com/testandgo-tests](https://testandgo.com/testandgo-tests)

Preguntas: Contáctenos en [testandgo.com](https://testandgo.com) o llame al (800) 402-0000.

### ANTES DE DEVOLVER EL KIT, CONFIRMAR:

- ✓ **EL KIT FUE ACTIVADO.** La muestra no se puede procesar si el kit no está activado.
- ✓ **FECHA DE NACIMIENTO e INICIALES** están escritos en la etiqueta.
- ✓ Entregará la muestra **EL MISMO DÍA** en que se recolecte.

### KIT CONTENTS




PAQUETE DE JUEGOS



LANCETAS (x3)



ALMOHADILLAS Y GASA

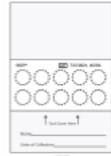

TARJETA DE RECOGIDA DE SANGRE



BOLSA DE MUESTRAS CON ALMOHADILLA ABSORBENTE



ETIQUETA CON CÓDIGO QR



VENDAS (x2)



CORREO DE DEVOLUCIÓN



BOLÍGRAFO

### INSTRUCCIONES DEL EQUIPO

#### 1 Activar equipo

- Escanee el código QR en la etiqueta del kit.
- Si no puede escanear la etiqueta, llame a nuestra línea de ayuda para completar este paso: 800-402-0000.



#### 2 Llenar etiqueta


El laboratorio solo puede procesar la muestra si la información correcta está escrita en la etiqueta.

- Escriba las **iniciales** y la **fecha de nacimiento** de la persona que se está examinando en la etiqueta.



#### 3 Preparar

- Beber un vaso de agua treinta minutos antes de la recolección.
- Coloque la etiqueta en la tarjeta como se muestra.

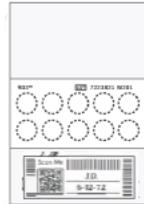

#### 4 Manos limpias

Cualquier persona que toque los suministros debe lavarse las manos. Use desinfectante/toallita o lávese las manos con jabón y agua tibia durante 20 segundos y séquelas bien con una toalla limpia.



#### 5 Usar lanceta

- Limpie su dedo medio o anular con la toallita con alcohol.
- Desenrosque la tapa de la lanceta.
- Presione la lanceta en la superficie del lado de la palma de su dedo, evitando el centro y la punta, para perforar la piel. Es posible que se necesite más de una punción. Se proporcionan lancetas adicionales.



#### 6 Recoger muestra de sangre

- Deja caer una gran gota de sangre en cada uno de los círculos.
- Trate de llenar cada círculo por completo.
- Apriete suavemente su dedo para liberar más sangre. Use lancetas adicionales si es necesario.



#### 7 Deje tiempo para que se seque

- Deje que la tarjeta de colección se seque por completo (al menos 45 minutos)
- Aplique vendaje(s) a sus pinchazos de lanceta



#### 8 Manos limpias


Antes de devolver la muestra recolectada al quiosco, use desinfectante para manos/toallita desinfectante para limpiarse las manos.



#### 9 Devolver muestra

La muestra **DEBE** ser entregada el mismo día en que se recolecta.

- Coloque la tarjeta de mancha de sangre etiquetada en la bolsa de riesgo biológico.
- Coloque la bolsa de riesgo biológico en el sobre prepago y séllelo.
- Deposite el sobre sellado en un buzón de entrega de FedEx o en una ubicación de envío de FedEx inmediatamente O deposítelo en el cajón de devolución del quiosco.

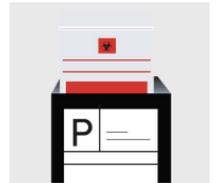

**CUANDO TUS RESULTADOS ESTÉN LISTOS, RECIBIRÁS UN TEXTO O CORREO ELECTRÓNICO. SI NO RECIBE SUS RESULTADOS DENTRO DE LAS 48 HORAS DESDE QUE EL LABORATORIO RECIBIÓ SU MUESTRA, LLAME AL 800-402-0000 PARA OBTENER ASISTENCIA.**

#### POR FAVOR LEE:

Busque atención médica inmediata de un profesional de la salud si está gravemente enfermo; NO espere los resultados de esta prueba. Llame al 9-1-1 si tiene una emergencia médica.